

NATCARE

MANUAL DE USUARIO ONYX

INTRODUCCIÓN

Gracias y enhorabuena por la compra del producto Nat Care, Onyx (NC-4000S) para el cuidado de su piel. A continuación, le presentamos el manual de usuario para la aplicación de este dispositivo, con el fin de hacer el uso correcto para el que ha sido creado. Aquí encontrará todas las instrucciones para este producto. Es muy importante que utilice este dispositivo únicamente para el uso para el que ha sido diseñado y probado, como se indica en este manual.

IMPORTANTE. No abra ni manipule el producto con el propósito de desmontar o hacer un mal uso del dispositivo.

FUNCIONES


El dispositivo de masaje de elevación de ojos de micro-corriente NC-4000S, es capaz de generar micro-corriente al atraer luz con un panel solar situado en el interior del dispositivo, para poder brindar un masaje de elevación a los ojos y reafirmar la piel alrededor de los ojos.

La perla de masaje de 360° aumenta la absorción de la crema en esta zona facial. El diseño en forma de V mejora los ojos caídos y elimina las coloraciones alrededor del párpado inferior. También puede brindar un masaje como en la cara y el cuello, lo que le da una apariencia más firme y contorneada.

CUIDADO ANTES DE USAR

- Coloque el dispositivo en un lugar donde la luz solar pueda incidir directamente sobre este dispositivo, ya que de esta forma los paneles solares absorberán luz para generar micro-corrientes.

OPERACIONES

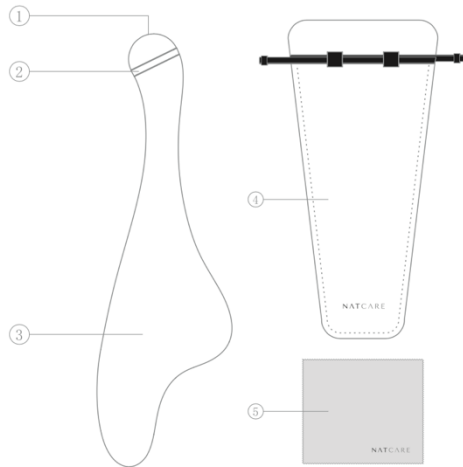

1. Perla masajeadora 360°.
2. Área del sensor de micro-corriente.
3. Panel de masaje en forma de V.
4. Bolsa de terciopelo.
5. Paño de limpieza.

MODO DE USO

El dispositivo puede aplicar un masaje en los ojos, la cara y el cuello, lo que reduce las líneas finas y hace que la piel se convierta firme y contorneada. Puede elegir su propio método de uso de acuerdo con sus necesidades.

MASAJE DE OJOS



1. Aplique un poco de crema para los ojos de manera uniforme en la zona inferior del párpado.



2. Realice movimiento de distribución de la goa de crema o sérum, aplicada en la parte inferior del párpado, con la perla masajeadora 360° del dispositivo hasta que se absorba la crema o sérum para los ojos.



3. Realice un masaje estimulante alrededor de los ojos con una parte en forma de V para reafirmar la piel.

MASAJE FACIAL



1. Aplique un poco suero de manera uniforme en tu rostro.



2. Haga el masaje por la parte en forma de V en la zona del parpado inferior, haga masaje de elevación de abajo hacia arriba.



3. Haga el masaje de la parte en forma de V a lo largo de su ala nasal hasta la sien, haciendo que las mejillas se tensen.



4. Haga que la parte curva exterior se eleve desde el ala nasal hasta el lóbulo de la oreja, reduciendo la apariencia de los pliegues nasolabiales.



5. Haga que la parte curva exterior se eleve desde las cejas arriba hasta la línea del cabello, reduciendo la apariencia de arrugas.

MASAJE DE CUELLO



1. Aplique un poco suero de manera uniforme en tu cuello.



2. Realice el masaje de la parte en forma de V contra tu cuello hacia arriba y hacia abajo, formando un cuello cisne.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto.	Onyx.
Referencia.	NC-4000S
Voltaje (Nominal.)	1-8 V.
Resistencia al agua.	No
Energía	Paneles solares integrados.
Dispositivo (Largo x Ancho x Alto).	145 x 45 x 17,2 mm.

PRECAUCIÓN Y SEGURIDAD

- No sumerja el producto.
- Se recomienda mantener el NC-4000S fuera de lugares con humedad o temperaturas extremadamente altas/bajas durante mucho tiempo para evitar daños.
- No utilice el dispositivo cuando tenga hinchazón, cirugía, quemaduras solares u otros síntomas cutáneos.
- Qúitese el reloj, las gafas, las pestañas postizas y las lentillas antes de utilizar el dispositivo NC-4000S.
- Evite el contacto directo con los ojos.
- Preste atención del producto mientras lo utiliza.
- Por favor, no desarme ni abra el NC-4000S para evitar daños físicos.
- No mueva el dispositivo sobre ningún material duro.

- Mantenga el dispositivo alejado del calor.
- No utilice el dispositivo si se golpea o cae al suelo con fuerza, a menos que se le haya realizado una verificación de seguridad.

LIMPIEZA

- Limpie el dispositivo con un paño suave y seco después de su uso.

ALMACENAMIENTO

- Mantenga el dispositivo seco y sin polvo.
- Mantenga el dispositivo alejado de altas temperaturas.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del declarante: Gedelson SA.

Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuleo 2, 08021 Barcelona (España).

Tel: +34 93 1162491

CIF: A58383746

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Descripción: Dispositivo para el cuidado de la piel (cepillo facial de silicona)

Marca: Nat Care

Modelo: NC-4000S

Fabricante: Gedelson SA.

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014*2:2015

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/30/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Marzo de 2014, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Barcelona, 1 Septiembre 2021.

Carlos Alberdi

Product Manager



NATCARE