

NATCARE

MANUAL DE USUARIO JADE

INTRODUCCIÓN

Gracias y enhorabuena por la compra del producto Nat Care, el Dispositivo de tratamiento de mascarilla térmica JADE (NC-5000N) para el cuidado de su piel.

A continuación, le presentamos el manual de usuario para la aplicación de este dispositivo, con el fin de hacer el uso correcto para el que ha sido creado.

Aquí encontrará todas las instrucciones para este producto.

Es muy importante que utilice este dispositivo únicamente para el uso para el que ha sido diseñado y probado, como se indica en este manual.

IMPORTANTE. No abra ni manipule el producto con el propósito de desmontar o hacer un mal uso del dispositivo.

FUNCIONES

El dispositivo de tratamiento de mascarilla térmica JADE (NC-5000N), combina tres elementos clave: calor, 3 luces LED de colores (amarillo, rojo y azul) y un cabezal de jade natural. Esta combinación única de características ayuda a mejorar la absorción del sérum/mascarilla y proporciona beneficios específicos para la piel. El dispositivo cuenta con tres modos de funcionamiento para adaptarse a diferentes necesidades:

- Modo "HYDRATING" (hidratación): Activa la luz azul amarilla para aumentar el flujo sanguíneo, estimular la renovación de las células de la piel y retener la humedad. El calor suave generado por el dispositivo ayuda a abrir los poros y potencia la absorción de los ingredientes hidratantes de tus productos para el cuidado de la piel.
- Modo "SOOTHING" (calmante): Activa la luz azul para reducir las bacterias, calmar el acné inflamado y disminuir el exceso de sebo. La

luz azul tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, lo que ayuda a mejorar la apariencia de la piel propensa al acné y reducir la inflamación.

- Modo "BRIGHTENING" (iluminación): Activa la luz led de color rojo para poder estimular la producción de colágeno y elastina. Estas dos proteínas son fundamentales para mantener la firmeza y elasticidad de la piel, y su estimulación puede ayudar a reducir la apariencia de las líneas finas y arrugas, dejando la piel más tersa y rejuvenecida.


El dispositivo de tratamiento de mascarilla térmica JADE es un compañero de belleza excepcional que ofrece múltiples beneficios para la piel. No solo mejora la absorción de los productos para el cuidado de la piel, sino que también proporciona efectos hidratantes, calmantes e iluminadores según el modo seleccionado. Utilizando tecnología avanzada y la suavidad del jade natural, este dispositivo ofrece una experiencia de cuidado de la piel integral y de calidad superior.

CUIDADO ANTES DE USAR

- Para garantizar el uso normal de NC-5000N, cárguelo antes de usarlo por primera vez.
- Utilice el cable de carga correspondiente para cargar y conéctelo al puerto del cargador siguiendo la posición correcta.

OPERACIONES

- 1- Tapa protectora transparente.
- 2- Anillo de cierre.
- 3- Cabezal de piedra jade.
- 4- Ranuras del anillo.
- 5- Puerto de carga
- 6- Botón encendido/apagado/modo.
- 7- Cuerpo de silicona.
- 8- Cable de carga.

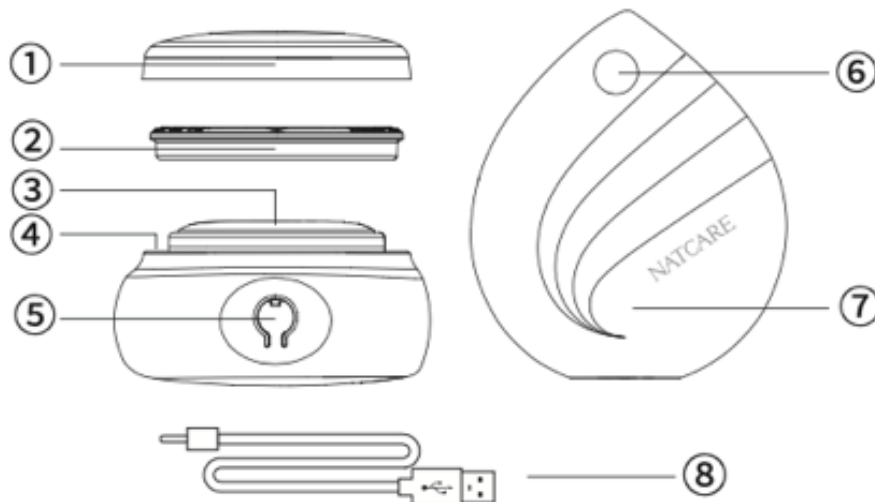

NOTA: Este producto se ha construido con batería de litio, que tan solo soporta el cable DC (incluido en el packaging).

INDICADORES

- 1- Modo "HYDRATING": Presiona el botón "Encendido/apagado/modo" para encender el dispositivo. Escucharás un pitido, pulsa el mismo botón y verás que la piedra jade alcanza el color amarillo. El dispositivo se configurará automáticamente en el modo "HYDRATING" y se apagará en 6 minutos de manera automática.
- 2- Modo "BRIGHTENING": Mientras está el modo "HYDRATING", presiona nuevamente el botón "Encendido/apagado/modo". Escucharás un pitido y verás que la piedra jade alcanza el color rojo. El dispositivo se configurará automáticamente en el modo "BRIGHTENING" y se apagará en 6 minutos de manera automática.
- 3- Modo "SOOTHING": Mientras está el modo "BRIGHTENING", presiona nuevamente el botón "Encendido/apagado/modo". Escucharás un pitido y verás que la piedra jade alcanza el color azul. El dispositivo se configurará automáticamente en el modo "SOOTHING" y se apagará en 6 minutos de manera automática.
- 4- Apagado. Manual: mientras el dispositivo está funcionando mantén presionado el botón "Encendido/apagado/modo" durante 1 segundo,

escucharás un pitido y se apagará automáticamente. Automático: después de 6 minutos de uso en cualquier modo, el dispositivo emitirá un pitido y se apagará automáticamente.

5- Baja batería:

- a. Cuando la carga de la batería sea inferior al 10%, el indicador de energía blanco parpadeará 3 veces. El dispositivo se iniciará normalmente y aún se podrá utilizar una vez más.
- b. Cuando la carga de la batería sea del 0%, el indicador de energía blanco parpadeará 3 veces y luego se apagará. El producto no se podrá encender.

6- Carga y carga completa: Indicador de energía blanco; Carga (parpadea), carga completa (se mantiene encendido).

MODO DE USO

El dispositivo nutre tu piel al proporcionar la esencia de las mascarillas faciales y sérums, logrando una mejor absorción. Además, combina múltiples tecnologías para satisfacer diversas necesidades de cuidado facial. Puedes crear un tratamiento facial personalizado seleccionando el modo que prefieras y potenciar la eficacia de las esencias de tus sérums o mascarillas favoritas.

Es importante mantener el dispositivo en constante movimiento mientras lo utilizas, realizando movimientos ascendentes en tu rostro. De esta manera, se optimiza la distribución de los productos y se maximizan los resultados. Con este dispositivo, puedes disfrutar de un cuidado facial adaptado a tus necesidades y obtener una piel radiante y saludable.

A continuación, se presenta un proceso de demostración. Puedes elegir el modo que prefieras.

1. Limpia tu rostro antes de utilizarlo.
2. Aplícate la mascarilla o sérum
3. Pulsa el botón Encendido/Apagado/Modo para encender el dispositivo, y busca el modo que quieres utilizar.

4. Mueve lentamente y masajea hacia arriba (mandíbula, mejillas, nariz y frente) con la piedra jade, evitando la piel de alrededor de los ojos.
5. El dispositivo se apagará de manera automática después de 6 minutos de tratamiento.
6. Limpia tu rostro con agua limpia. Luego, utiliza una toalla facial fría para cerrar los poros. Después, aplica un producto hidratante para el cuidado de la piel.
7. Enjuagar el dispositivo con agua limpia, sécalo y guárdalo cubierto.

ESPECIFICACIONES

Artículo	Unidad	Especificación
Voltaje de trabajo	V	3.7V
Corriente de trabajo	A	Modo "Hydrating"< 1.5A Modo "Brightening"< 1.5 ^a Modo "Soothing"<0.2A
Longitud de la onda de luz amarilla	nm	590+/-10nm
Longitud de la onda de luz roja	nm	620+/-10nm
Longitud de la onda de luz azul	nm	470+/-10nm
Capacidad de la batería	mAh	1000 mAh batería de litio
Tiempo de carga	H	<5 horas
Grado de resistencia al agua	/	IPX7
Duración	Min	6 minutos
Tiempo de espera	Times	20°C-40°C Temperatura de trabajo Modo "Hydrating">=10T Modo "Brightening">=10T Modo "Soothing">=80T

Consejos

- 1- El dispositivo tiene una función de memoria, restaurará el último modo que utilizaste al encenderlo.
- 2- Al cambiar el dispositivo a cualquier modo de trabajo, después de 6 minutos se apagará automáticamente.

PRECAUCIÓN Y SEGURIDAD

ADVERTENCIAS:

- 1- Prohibido para niños.
- 2- No lo uses si tienes hinchazón en la piel, heridas quirúrgicas, quemaduras solares u otros síntomas cutáneos.
- 3- Quita relojes, gafas, pestañas postizas, lentes de contacto y otros objetos sólidos antes de usarlo.
- 4- No continúes usando el producto si está dañado y ha causado una superficie de masaje irregular.
- 5- No entres en contacto directo con el globo ocular con el producto.
- 6- No uses el dispositivo en la misma área durante demasiado tiempo.
- 7- Evita que varias personas compartan el mismo producto.
- 8- No dejes el dispositivo desatendido cuando está encendido.
- 9- Por favor, mantelo alejado de las altas temperaturas.
- 10- No manipule ni desmonte el dispositivo.
- 11- No lo utilices si el dispositivo o la silicona están dañados.
- 12- En el caso de que el dispositivo haya caído al suelo, por favor verifica si ha sufrido algún daño antes de continuar utilizándolo.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

- Enjuaga el dispositivo con agua limpia inmediatamente después de usarlo y luego sécalo.

ALMACENAMIENTO

- No sumerjas el dispositivo en el agua durante mucho tiempo. Mantenlo seco y limpio. Mantén el dispositivo alejado de las altas temperaturas. Mantén el dispositivo fuera del alcance los niños.

FAQ

FALLOS	ANALISIS	SOLUCIONES
El dispositivo deja de funcionar de manera repentina	<ol style="list-style-type: none">1. El dispositivo se ha quedado sin batería.2. Hay algún problema con el dispositivo.	<ol style="list-style-type: none">1. Cargue el dispositivo durante 5 horas y vuelve a intentarlo.2. Si aún no funciona, por favor ponte en contacto con el equipo de servicio postventa para obtener ayuda.
Problema de fallo NTC	El indicador del modo parpadea cuando el dispositivo se enciende.	El fallo viene por el sensor de la temperatura. Ponte en contacto con el equipo de servicio postventa para obtener ayuda.
El dispositivo no se enciende	<ol style="list-style-type: none">1. El indicador no se enciende (falla en la batería o en la placa)2. El indicador blanco parpadea (batería baja)	<ol style="list-style-type: none">1. Cargue el dispositivo durante 5 horas y vuelve a intentarlo.2. Si aún no funciona, por favor ponte en

		contacto con el equipo de postventa.
El dispositivo no carga	<ol style="list-style-type: none"> 1. El cable no está conectado correctamente. 2. El dispositivo no ha sido cargado lo suficiente. 3. La batería ha llegado al final de su vida útil (en condiciones normales la vida útil de una batería debería ser de hasta 3 años). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica y asegúrate de que haya un buen contacto entre el dispositivo y el cargador (la luz indicadora parpadea durante la carga). 2. Si aún no funciona, por favor, ponte en contacto con el equipo de servicio postventa.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del declarante: Gedelson SA.

Dirección: Tuset 5-11, 2-A, 08006 Barcelona (Spain).

Tel: +34 93 1162491

CIF: A58383746

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Descripción: el Dispositivo de tratamiento de mascarilla térmica JADE

Marca: Nat Care

Modelo: NC-5000N

Fabricante: Gedelson SA.

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014*2:2015

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/30/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Marzo de 2014, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Barcelona, 1 Septiembre 2023.

Carlos Alberdi

Product Manager

