

NATCARE

MANUAL DE USUARIO TOPAZ

INTRODUCCIÓN

Gracias y enhorabuena por la compra del producto Nat Care, el Dispositivo de belleza antienvjecimiento RF&EMS de doble cabezal TOPAZ (NC-8000N) para el cuidado de su piel. A continuación, le presentamos el manual de usuario para la aplicación de este dispositivo, con el fin de hacer el uso correcto para el que ha sido creado. Aquí encontrara todas las instrucciones para este producto. Es muy importante que utilice este dispositivo únicamente para el uso para el que ha sido diseñado y probado, como se indica en este manual.

IMPORTANTE. No abra ni manipule el producto con el propósito de desmontar o hacer un mal uso del dispositivo.

FUNCIONES

El Dispositivo de belleza antienvjecimiento RF&EMS de doble cabezal TOPAZ (NC-8000N), combina RF (Radio Frecuencia), EMS y las luces LED rojas y amarillas. El diseño del cuerpo con forma ergonómica lo hace adecuado para sostenerlo con la mano.

Modo EMS + RF (frecuencia alta/baja): Este modo combina EMS, RF, luz roja de longitud de onda de 633nm y vibración. La combinación de múltiples tecnologías permite el antienvjecimiento, rejuvenecimiento de la piel, activación celular, promoción del metabolismo celular y la regeneración de colágeno. Finalmente, levanta y rejuvenece la piel.

Modo RF (frecuencia alta/baja): Este modo utiliza RF y la luz LED amarilla de longitud de onda de 590nm. La energía de RF penetra en la dermis para promover la regeneración de colágeno y reducir las arrugas. Con la función masaje, ayuda a que la piel se vea más firme y rejuvenecida.

Modo EMS (frecuencia alta/baja): Este modo utiliza EMS y un rodillo 3D de diamante. Con un ángulo de 58.8° y tecnología de microcorriente de doble frecuencia, la microcorriente estimula los músculos y el drenaje linfático para levantar y reafirmar la piel. Ayuda a esculpir y dar forma al contorno facial de manera efectiva.


CUIDADO ANTES DE USAR

- Para garantizar el uso normal de NC-8000N, cárguelo antes de usarlo por primera vez.
- Utilice el cable de carga correspondiente para cargar y conéctelo al puerto del cargador siguiendo la posición correcta.

OPERACIONES

1. Tapa protectora transparente.
2. Rodillo de diamante 3D.
3. Luz indicadora "EMS".
4. Botón de encendido/apagado.
5. Luz indicadora "RF".
6. Luz indicadora "EMS+RF".
7. Luz indicadora de carga.
8. Cabezal flotante de masaje.
9. Perla de masaje.
10. Barra.
11. Puerto de carga Tipo-C.
12. Tapa magnética.
13. Cable USB Tipo-C.

14. Paño de limpieza.

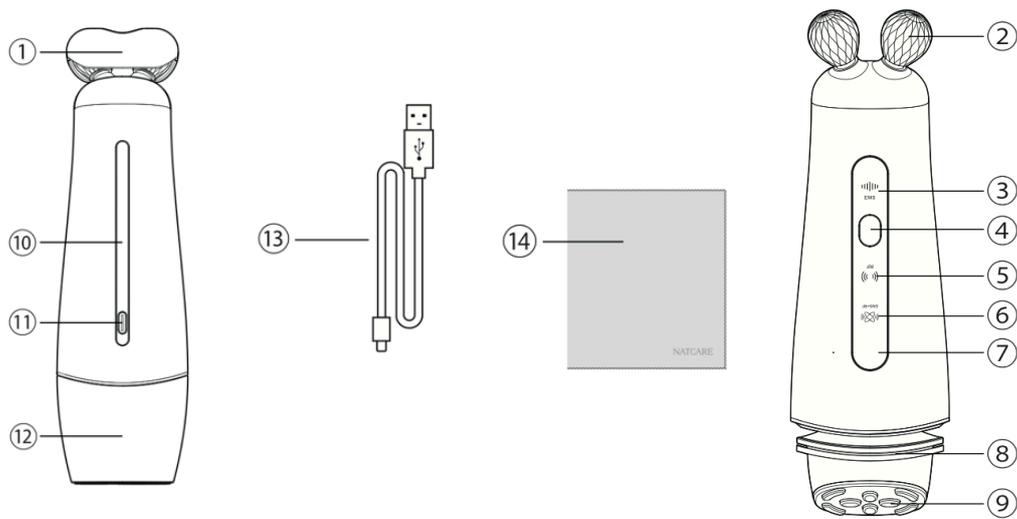

*** NOTA: Este producto se ha construido con batería de litio, que tan solo soporta cable tipo-C (incluido en el packaging).

INDICADORES

NO. // ARTÍCULO // INDICACIONES

1 – Encender

Presiona el botón de encendido/apagado durante 1 segundo para encenderlo. Emitirá un pitido una vez y comenzará a funcionar.

2- Modos de trabajo

- 1- Modo EMS+RF (suave): Retire la tapa y presione el botón de encendido/apagado durante 1 segundo. Escuchará un pitido y el dispositivo comenzará a vibrar con luz LED roja. La luz indicadora blanca se encenderá para indicar que el modo está activo.
- 2- Modo EMS+RF (fuerte): Presiona el botón de ENCENDIDO/APAGADO para cambiar al modo, la luz indicadora

naranja se encenderá. El dispositivo comenzará a vibrar con RF y luz LED roja.

- 3- Modo RF (suave): Presiona el botón de ENCENDIDO/APAGADO para cambiar al modo, la luz indicadora blanca se encenderá. El dispositivo activará la luz amarilla.
- 4- Modo RF (fuerte): Presiona el botón de ENCENDIDO/APAGADO para cambiar al modo, la luz indicadora naranja se encenderá. El dispositivo comenzará a vibrar de manera continua con RF y luz amarilla.
- 5- Modo EMS (suave): Presiona el botón de ENCENDIDO/APAGADO para cambiar al modo, la luz indicadora blanca se encenderá. El rodillo 3D de diamante funcionará con la función EMS.
- 6- Modo EMS (fuerte): Presiona el botón de ENCENDIDO/APAGADO para cambiar al modo, la luz indicadora naranja se encenderá. El rodillo 3D de diamante funcionará con la función EMS.

3- Apagar

Presione el botón de encendido/apagado durante 1 segundo, hará un pitido y se apagará.

4- Indicador de batería:

1. El indicador de batería es de color blanco.
2. El dispositivo emitirá dos pitidos y el indicador de luz blanca parpadeará cuando la batería sea inferior al 10%. En este caso, solo se podrá usar una vez en cualquier modo.
3. Si la batería está agotada, el indicador de luz blanca parpadeará dos veces y se escucharán 2 pitidos. No podrá iniciar el funcionamiento.
4. El indicador de luz blanca parpadeará mientras se está cargando.
5. El indicador de luz blanca estará encendido mientras esté completamente cargado y se apagará al desconectar el adaptador.

5- Carga

El indicador de luz blanca parpadea

6 – Carga completa

El indicador de luz blanca se enciende.

MODO DE USO

A continuación, se presenta un proceso de demostración de uso.

Modo EMS+RF o Modo RF

- 1- Aplica en tu rostro y cuello un poco de gel conductor
- 2- Enciende el dispositivo escoge el modo EMS+RF o RF con la intensidad que desees.
- 3- Ajusta el cabezal del masajeador en tu piel y muévelo lentamente en círculos desde abajo hacia arriba para realizar el masaje.
- 4- Temporizador de 3 minutos para recordar el cambio de área de uso. Por favor, no coloques el cabezal de masaje en una misma área durante demasiado tiempo.
- 5- Limpia el cabezal de masaje con un paño y luego coloca la tapa.

Modo EMS

- 1- Aplica en tu rostro y cuello un poco de gel conductor.
- 2- Enciende el dispositivo, escoge el modo EMS con la intensidad que desees.
- 3- Ajusta el rodillo 3D de diamante en tu rostro y muévelo a una velocidad constante levantando bien la piel.
- 4- Temporizador de 3 minutos para recordar el cambio de área de uso. Por favor, no coloques el rodillo 3D de diamante en una misma área durante demasiado tiempo.

5- Limpia el rodillo 3D diamante con un paño y luego coloca la funda.

CONSEJOS:

1. La duración de los modos EMS+RF y RF es de 6 minutos. El dispositivo se apagará automáticamente si no hay ninguna operación y se reiniciará al cambiar a otro modo.
2. El dispositivo cuenta con una función de memoria, restaurará el último modo utilizado al encenderlo.
3. El dispositivo tiene un sistema de control de temperatura, pero aun así recomendamos no mantener el cabezal de masaje en una misma área durante más de 3 segundos al utilizar la función de RF.

ESPECIFICACIONES:

| Artículo | Unidad | Especificaciones |
|--|--------|---|
| Voltaje Nominal | V | 3.7V |
| Corriente de funcionamiento | A | RF:800-1000mA EMS+RF:100-1200mA EMS:30-80mA |
| RF frecuencia | MHz | 2MHz±10K |
| Longitud de la onda de la luz roja. | nm | 633±10nm |
| Longitud de la onda de la luz amarilla | nm | 590±10nm |
| Capacidad de la batería | mAh | 1200 mAh lithium Battery |
| Tiempo de carga | H | <3h |
| Resistencia al agua. | / | IPX6 |
| Temporizador | Min | 6 min |
| Tiempo de trabajo (20°C-40° entorno operativo) | Times | EMS+RF:≥8T RF:≥8T EMS:≥40T |

PRECAUCIÓN Y SEGURIDAD

CONTRADICCIONES

- 1- Los niños tienen prohibido utilizarlo.
- 2- Las personas que tienen órganos electrónicos humanos tienen prohibido utilizarlo.
- 3- Las personas que se hayan sometido a cirugía de piel en el último mes o que hayan estado expuestas al sol no deben usarlo.
- 4- Las personas con piel dañada, supuración, inflamación, cicatrices y sensibilidad electromagnética no deben usarlo.
- 5- Las mujeres embarazadas, en período de lactancia, personas con hemofilia y enfermedades hemorrágicas tampoco deben usarlo.
- 6- No lo uses si tienes cáncer, sospecha de cáncer o lesiones precancerosas, especialmente cáncer de piel o nevus precancerosos.
- 7- No lo uses en la misma área de la piel durante mucho tiempo.
- 8- Por favor, consulta al médico antes de usarlo si has realizado una cirugía estética mínima.
- 9- No lo uses si tienes metal en tus dientes.
- 10- No coloques el cabezal flotante de masaje y el rodillo 3D de diamante en los ojos.
- 11- Por favor, quítate los relojes, gafas y otros objetos con sustancias metálicas antes de usarlo.

CONSEJOS

- 1- No dejes este producto solo cuando esté en funcionamiento.
- 2- No manipule ni desmonte el dispositivo.
- 3- Si el producto recibe un golpe o se cae al suelo, por favor verifica los daños antes de seguir usándolo.
- 4- Por favor, mantenlo alejado de las altas temperaturas.

MANTENIMIENTO

Limpieza

Por favor, lava el cabezal de masaje y el rodillo 3D de diamante con agua corriente y utiliza un paño suave para limpiarlos. No sumerjas el dispositivo en agua.

Almacenamiento

Por favor, mantén la máquina en un lugar seco y libre de polvo. Mantenla alejada de altas temperaturas.

Por favor, mantenla fuera del alcance de los niños.

FAQ

| FALLOS | ANALISIS | SOLUCIONES |
|---|---|---|
| No se enciende o las luces no funcionan | <ol style="list-style-type: none">1- Se ha quedado sin batería2- Las luces están dañadas o el programa falla | <ol style="list-style-type: none">1- Cargue el dispositivo durante 4 horas y vuelve a intentarlo.2- Si aún no funciona, por favor, ponte en contacto con el equipo de servicio postventa para obtener ayuda. |
| No funciona después de cargarlo | <ol style="list-style-type: none">1- El cable no está conectado correctamente.2- El dispositivo no ha sido cargado lo suficiente.3- La batería ha llegado al final de | <ol style="list-style-type: none">1- Verifica y asegúrate de que haya un buen contacto entre el dispositivo y el cargador (la luz indicadora |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>su vida útil (en condiciones normales la vida útil de una batería debería ser de hasta 3 años.)</p> | <p>parpadea durante la carga).</p> <p>2- Si aún no funciona, por favor, ponte en contacto con el equipo de servicio postventa.</p> |
|--|--|--|

CONSEJOS:

Por favor, carga completamente el dispositivo si no ha sido utilizado durante más de 6 meses.

DECLARACIÓN: El contenido de este documento ha sido verificado. Las mejoras tecnológicas del producto o del software se recopilarán en una nueva versión del manual. Si se modifican la apariencia, el color o el rendimiento, consulte el producto real.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del declarante: Gedelson SA.

Dirección: Tuset 5-11, 2-A, 08006 Barcelona (Spain).

Tel: +34 93 1162491

CIF: A58383746

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Descripción: Dispositivo de belleza antienvjecimiento RF&EMS de doble cabezal TOPAZ

Marca: Nat Care

Modelo: NC-8000N

Fabricante: Gedelson SA.

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014*2:2015

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/30/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Marzo de 2014, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Barcelona, 1 Septiembre 2023.

Carlos Alberdi

Product Manager

