

# NATCARE

## MANUAL DE USUARIO SUNSTONE

### INTRODUCCIÓN

Gracias y enhorabuena por la compra del producto Nat Care, la Máscara de belleza rejuvenecedora con terapia de luz SUNSTONE (NC-9000N) para el cuidado de su piel. A continuación, le presentamos el manual de usuario para la aplicación de este dispositivo, con el fin de hacer el uso correcto para el que ha sido creado. Aquí encontrará todas las instrucciones para este producto. Es muy importante que utilice este dispositivo únicamente para el uso para el que ha sido diseñado y probado, como se indica en este manual.

**IMPORTANTE.** No abra ni manipule el producto con el propósito de desmontar o hacer un mal uso del dispositivo.

### FUNCIONES


La Máscara de belleza rejuvenecedora con terapia de luz SUNSTONE (NC-9000N) combina cuatro tipos de ondas de luz: luz roja profunda, luz roja, luz infrarroja cercana y luz ámbar dorada. Con 220 perlas de luz de alta energía que cubren todo el rostro y activan la regeneración del colágeno en las capas profundas de la piel. Ofrece tres modos funcionales: Calmante, Iluminador y Antienvjecimiento, que se pueden seleccionar según las diferentes etapas de la piel. El dispositivo funciona con un solo toque y proporciona indicaciones de voz. Cada modo tiene una duración de 10 minutos y se apaga automáticamente, ofreciendo una reparación profunda a la piel durante un período de 28 días. El dispositivo presenta un diseño similar a una máscara, lo que lo hace ligero y cómodo de utilizar.

### CUIDADO ANTES DE USAR

- Para garantizar el uso normal de NC-9000N, cárguelo antes de usarlo por primera vez.
- Utilice el cable de carga correspondiente para cargar y conéctelo al puerto del cargador siguiendo la posición correcta.

## OPERACIONES

- 1- Botón de encendido/apagado/Luz indicadora.
- 2- Ventana de protección ocular.
- 3- Fotón LED.
- 4- Puerto de carga USB.
- 5- Banda ajustable para la cabeza.
- 6- Marco de soporte para la barbilla.
- 7- Cable de carga USB.

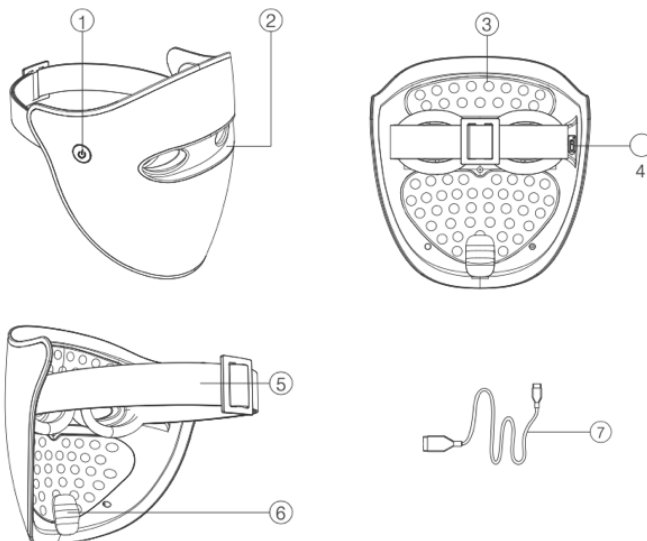

\*\*\* NOTA: Este producto se ha construido con batería de litio, que tan solo soporta cable tipo-C (incluido en el packaging).

# INDICADORES

## NO. // ARTÍCULO // INDICACIONES

### 1 – Modos de trabajo

- 1- Modo Calmante: Presione el botón encendido una vez, el indicador parpadea en blanco, emite un sonido de pitido, y la voz anuncia "Soothing mode". La luz roja permanece encendida de manera continua y el dispositivo se apaga automáticamente después de 10 minutos.
- 2- Modo iluminación: Presiona el botón de encendido dos veces, el indicador parpadea en blanco, emite un sonido de pitido, y la voz anuncia "Brightening mode". La luz roja permanece encendida de manera continua y el dispositivo se apaga automáticamente después de 10 minutos.
- 3- Modo antienvjecimiento: Presiona el botón de encendido tres veces, el indicador parpadea en blanco, emite un sonido de pitido, y la voz anuncia "Anti-aging mode". La luz roja permanece encendida de manera continua y el dispositivo se apaga automáticamente después de 10 minutos.

NOTA: Si no se realiza ninguna operación, el dispositivo se apagará automáticamente después de 10 minutos. La duración no se acumula al cambiar de modos durante su funcionamiento.

### 2- Apagado

Apagado automático. Pulsa el botón encendido para apagarlo. La máscara emitirá dos pitidos, la luz se apagará y el dispositivo dejará de funcionar.

### 3- Batería baja:

Cuando el nivel de batería está por debajo del 30%, el botón de encendido/el indicador parpadeará en rojo, indicando la necesidad de carga. El dispositivo aún puede usarse durante 10 minutos. Cuando el nivel de batería es críticamente bajo, el dispositivo no puede encenderse. El botón de encendido/el indicador parpadeará en rojo, acompañados de dos pitidos cortos y se repetirán una vez.

#### 4- Carga completa

Botón de encendido/apagado: El indicador rojo parpadea en rojo y el dispositivo no funciona.

#### 5- Carga completa

Cuando el dispositivo esté completamente cargado, el botón encendido/apagado/el indicador de luz se mantendrá en blanco y se apagará al desconectarlo.

### MODO DE USO

A continuación, le presentamos los siguientes pasos generales para usar el dispositivo. Se recomienda utilizarlo de 3 a 5 veces por semana.

- 1- Limpie su rostro y séquelo.
- 2- Colócate la máscara y elige el modo de cuidado de la piel según tu preferencia.
- 3- Después de 10 minutos de tratamiento, la máscara se apagará automáticamente.
- 4- Retira la máscara y continúa con tu rutina de cuidado de la piel.

NOTA: Cuando utilices la máscara, ajusta el marco de soporte para la barbilla según la forma de tu rostro y ajusta la tensión de la banda para la cabeza en función de la circunferencia de tu cabeza.

### ESPECIFICACIONES:

No.	Artículo	Unidad	Especificaciones	
1	Voltaje Nominal.	V.	DC3.7V.	
2	Corriente de funcionamiento.	mA.	Modo calmante<600mA. Modo iluminación<900mA. Modo antienvjecimiento<1300 mA.	
3	Capacidad de la batería.	mAh.	1000 mAh .	
4	Tiempo de carga.	H.	< 3 horas.	
5	Temporizador automático.	Min.	10 minutos.	
6	Tiempo de espera.	Min.	>= 60 Min.	
7	Tipos de Ondas de Luz.	/	4 ondas de luz: Luz roja profunda, luz roja, luz infrarroja cercana, luz ámbar dorada.	
8	Número de bombillas de luz.	Bombillas de luz.	220.	
9	Longitud de onda de Fotonos.	Nm.	<table border="1"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luz roja profunda: 660±5nm.</li> <li>2. Luz roja: 630±5nm.</li> <li>3. Luz infrarroja cercana: 850±5nm.</li> <li>4. Luz ámbar dorada: 605±5nm.</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luz roja profunda: 660±5nm.</li> <li>2. Luz roja: 630±5nm.</li> <li>3. Luz infrarroja cercana: 850±5nm.</li> <li>4. Luz ámbar dorada: 605±5nm.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luz roja profunda: 660±5nm.</li> <li>2. Luz roja: 630±5nm.</li> <li>3. Luz infrarroja cercana: 850±5nm.</li> <li>4. Luz ámbar dorada: 605±5nm.</li> </ol>				
10	Irradiancia.	mW/cm <sup>2</sup> .	<table border="1"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modo Calmante: 20±5mW/cm<sup>2</sup>.</li> <li>2. Modo Iluminación: 30±5mW/cm<sup>2</sup>.</li> <li>3. Modo Antienvjecimiento: 43±5mW/cm<sup>2</sup>.</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modo Calmante: 20±5mW/cm<sup>2</sup>.</li> <li>2. Modo Iluminación: 30±5mW/cm<sup>2</sup>.</li> <li>3. Modo Antienvjecimiento: 43±5mW/cm<sup>2</sup>.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modo Calmante: 20±5mW/cm<sup>2</sup>.</li> <li>2. Modo Iluminación: 30±5mW/cm<sup>2</sup>.</li> <li>3. Modo Antienvjecimiento: 43±5mW/cm<sup>2</sup>.</li> </ol>				

## PRECAUCIÓN Y SEGURIDAD

### RESTRICCIONES DE USO

- 1- No lo utilices si has pasado por una cirugía de la piel o has sufrido quemaduras solares en el último mes.
- 2- No uses el dispositivo si tienes inflamación en la piel, cicatrices, piel dañada o eres alérgico a los campos electromagnéticos.
- 3- Las mujeres embarazadas o personas con condiciones de salud inestables no deben utilizarlo.
- 4- No mires directamente a la luz de la máscara de belleza antes de confirmar que el producto está listo para usar.

### CONSEJOS

- 1- No dejes este producto solo cuando esté en funcionamiento.
- 2- No uses el dispositivo mientras se está cargando.
- 3- No desmontes el dispositivo.
- 4- No sigas usando el dispositivo si el protector de silicona para los ojos está dañado y causa fugas de luz.
- 5- Asegúrate de que el enchufe y el cable de alimentación estén en buen estado para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- 6- Si el producto sufre un golpe o una caída intensa, verifica si hay algún daño antes de seguir utilizándolo.

### MANTENIMIENTO

#### Limpieza

Limpia el dispositivo con un paño limpio y suave después de usarlo. No sumerjas la máscara en agua; mantenla seca.

#### Almacenamiento

Mantén el dispositivo seco y limpio.

Aleja el dispositivo de ambientes de alta temperatura.

Mantén el dispositivo alejado de líquidos corrosivos.

## FAQ

FALLOS	ANALISIS	SOLUCIONES
No se enciende o las luces no funcionan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Se ha quedado sin batería.</li><li>2- Las luces están dañadas o el programa falla.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Cargue el dispositivo durante 3 horas y vuelva a intentarlo.</li><li>2- Si aún no funciona, por favor, ponte en contacto con el equipo de servicio postventa para obtener ayuda.</li></ol>
No funciona después de cargarlo.	<ol style="list-style-type: none"><li>1- El cable no está conectado correctamente.</li><li>2- El dispositivo no ha sido cargado lo suficiente.</li><li>3- La batería ha llegado al final de su vida útil (en condiciones normales la vida útil de una batería debería ser de hasta 3 años.)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Verifica y asegúrate de que haya un buen contacto entre el dispositivo y el cargador (la luz indicadora parpadea durante la carga).</li><li>2- Si aún no funciona, por favor, ponte en contacto con el equipo de servicio postventa.</li></ol>

## CONSEJOS:

Por favor, carga completamente el dispositivo si no ha sido utilizado durante más de 6 meses.

DECLARACIÓN: El contenido de este documento ha sido verificado. Las mejoras tecnológicas del producto o del software se recopilarán en una nueva versión del manual. Si se modifican la apariencia, el color o el rendimiento, consulte el producto real.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del declarante: Gedelson SA.

Dirección: Tuset 5-11, 2-A, 08006 Barcelona (Spain).

Tel: +34 93 1162491

CIF: A58383746

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Descripción: Máscara de belleza rejuvenecedora con terapia de luz SUNSTONE

Marca: Nat Care

Modelo: NC-9000N

Fabricante: Gedelson SA.

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014\*2:2015



De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/30/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Marzo de 2014, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Barcelona, 1 Septiembre 2023.

Carlos Alberdi

Product Manager

